

Artikel-Info Carbonfußserie GO.



- Carbonfuß GO.smart.....08
- Carbonfuß GO.relax09
- Carbonfuß GO.free.....10
- Carbonfuß GO.adventure11
- Zubehör12 – 13

Für Menschen gemacht.

Für gesunde Menschen sind Bewegung, Freiheit und Mobilität meist eine Selbstverständlichkeit. Für Amputierte an den unteren Extremitäten hingegen ein hohes Privileg. Mit einem Prothesenfuß kann es gelingen, diesen Verlust auszugleichen und Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das dem eines gesunden Menschen nahe kommt.

Dafür ist es wichtig, die Versorgung individuell und entsprechend der Aktivität des Anwenders auszuwählen.

Die Prothesenfußserie GO., die größtenteils im Hause Streifeneder entwickelt wurde, deckt mit den vier Modellen GO.smart, GO.relax, GO.free und GO.adventure alle Mobilitätsklassen zwischen eins und vier ab.

Bei jedem Prothesenfuß können sich Kunden auf eine gewohnt hochwertige Materialzusammensetzung, optimalen Tragekomfort und erstklassige Qualität verlassen.

Vier Mal Qualität.

Die Basis aller vier Modelle ist eine breite Feder aus mehrschichtigem Carbon. Sie garantiert seitliche Stabilität und kommt Prothesenträgern mit einem großen Sicherheitsbedürfnis entgegen. Gemeinsam mit den formfesten aber flexiblen Elastomeren entsteht ein intelligentes Zusammenspiel der Materialien, das Dynamik, Multiaxialität und ein geregeltes und natürliches Gangverhalten sicherstellt.

Das Carbon dient als optimaler Energiespeicher: bei Fersenauftritt wird Energie aufgenommen, gespeichert und schließlich beim Abrollen der Zehen wieder abgegeben.




Funktional und dynamisch.

Der GO.smart und der GO.relax sind auf die Bedürfnisse von mobil eingeschränkten und mäßig aktiven Anwendern abgestimmt. Die Prothesenfüße sind die idealen Begleiter im eigenen Zuhause und dem näheren Umfeld, da sie unebene Böden wie Kopfsteinpflaster oder Rasenwege perfekt ausgleichen. Tragekomfort und Sicherheit entsteht durch den langen Vorfußhebel und den Einsatz des Elastomers, das die Bewegung aufnimmt und die Carbonfüße zu einem multiaxialen Gelenk macht.

Für im Alltag aktive oder sogar sportliche Anwender sind der GO.free oder der GO.adventure die optimale Lösung. Die dritte Carbonfeder im GO.adventure dämpft vertikale Stoßbelastungen und erhöht spürbar die Energierückgabe. Bei beiden Produkten kann der Techniker außerdem die Fersenhärte durch zwei einsetzbare Keile individuell an die Anforderungen des Trägers anpassen.

Bestellen mit Struktur.

Um einen einfachen und schnellen Bestellvorgang zu gewährleisten, folgen die Artikelnummern aller Prothesenfüße und dem Zubehör einer einheitlichen Struktur. Die hier abgebildeten Tabellen zeigen den exemplarischen Aufbau:

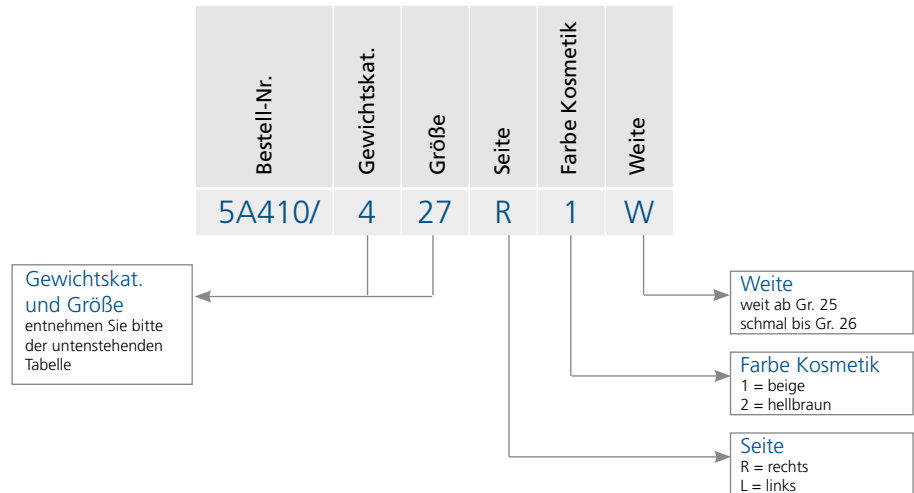

GO.relax 5A420 / GO.free 5A430 / GO.adventure 5A440

max. Körpergewicht	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg	150 kg
Gewichtskat.	3	4	5	6	7
Größe 22 cm					
Größe 23 cm					
Größe 24 cm					
Größe 25 cm					
Größe 26 cm					
Größe 27 cm					
Größe 28 cm					
Größe 29 cm					

GO.smart 5A410

max. Körpergewicht	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg
Gewichtskat.	3	4	5	6
Größe 22 cm				
Größe 23 cm				
Größe 24 cm				
Größe 25 cm				
Größe 26 cm				
Größe 27 cm				
Größe 28 cm				
Größe 29 cm				

Starkes Cover.

Die Kosmetik für die Carbonfüße GO. ermöglicht ein natürliches und unauffälliges Erscheinungsbild. Das Cover schützt vor alltäglichem Verschleiß wie Kratzern oder Stößen und ist dennoch leicht und angenehm zu tragen. Das Produkt ist in zwei verschiedenen Weiten und Hautfarbtönen erhältlich und zeichnet sich durch eine hervorragende Passform in allen Größen aus.

Ein angenehmer Vorteil: die Kosmetik passt auf alle Modelle der GO.-Serie. Die Anschlusskappe lässt sich durch einfaches Einklicken befestigen und schließt die Kosmetik in harmonischer, runder Form ab.

Vorteile auf einen Blick

- natürliche Optik
- angenehme, hochwertige Haptik
- Anschlusskappe schließt Kosmetik rund ab
- in 2 Weiten erhältlich
- 2 Hautfarbtöne verfügbar
- Kosmetik passt zu allen Modellen der GO.-Serie
- extrem formstabil



GO.smart

Carbonfuß



- intelligentes Zusammenspiel zwischen Elastomer und Carbon
- geregeltes dynamisches Verhalten
- breite Basisfeder für seitliche Stabilität
- langer Vollkontakt
- Multiaxialität
- inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke

Technische Daten

- max. Körpergewicht bis 125 kg (je nach Größe)
- Mobilitätsklasse (Walky): 1 bis 2
- Anschluss: Pyramide
- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: 594 g (Gr. 27 inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)
- Einbauhöhe: Größe 22 – 25 cm = 61 mm, Größe 26 – 29 cm = 69 mm
- wartungsfrei
- Garantie: 24 Monate

Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 26 cm	links	beige	5A410/..L1
22 – 26 cm	rechts	beige	5A410/..R1
25 – 29 cm	links	beige	5A410/..L1W
25 – 29 cm	rechts	beige	5A410/..R1W
22 – 26 cm	links	hellbraun	5A410/..L2
22 – 26 cm	rechts	hellbraun	5A410/..R2
25 – 29 cm	links	hellbraun	5A410/..L2W
25 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A410/..R2W

Bitte geben Sie die gewünschte Größe an, z. B. 5A410/324L1 = Gr. 24 cm, links, beige

 Der Buchstabe „W“ am Ende der Artikelnummer bedeutet eine weite Fußform speziell für Männer



GO.relax

Carbonfuß



- intelligentes Zusammenspiel zwischen Elastomer und Carbon
- natürliches Gangbild auf unterschiedlichen Untergründen
- breite Basisfeder für seitliche Stabilität
- langer Vollkontakt
- Multiaxialität
- inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke

Technische Daten

- max. Körpergewicht bis 150 kg (je nach Größe)
- Mobilitätsklasse (Walky): 2 bis 3
- Anschluss: Pyramide
- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: 620 g (Gr. 27 inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)
- Einbauhöhe: Größe 22 – 25 cm = 103 mm, Größe 26 – 29 cm = 106 mm
- wartungsfrei
- Garantie: 24 Monate

Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 26 cm	links	beige	5A420/..L1
22 – 26 cm	rechts	beige	5A420/..R1
25 – 29 cm	links	beige	5A420/..L1W
25 – 29 cm	rechts	beige	5A420/..R1W
22 – 26 cm	links	hellbraun	5A420/..L2
22 – 26 cm	rechts	hellbraun	5A420/..R2
25 – 29 cm	links	hellbraun	5A420/..L2W
25 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A40/...R2W

Bitte geben Sie die gewünschte Größe an, z. B. 5A420/324L1 = Gr. 24 cm, links, beige

J Der Buchstabe „W“ am Ende der Artikelnummer bedeutet eine weite Fußform speziell für Männer



GO.free

Carbonfuß



- intelligentes Zusammenspiel zwischen Elastomer und Carbon
- dynamisches und natürliches Gangbild auf unterschiedlichen Untergründen
- breite Basisfeder für seitliche Stabilität
- langer Vollkontakt
- Multiaxialität
- flexible Einstellung der Fersenhärte durch Fersenkeile
- inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke

Technische Daten

- max. Körpergewicht bis 150 kg (je nach Größe)
- Mobilitätsklasse (Walky): 3 bis (4) (nicht geeignet für regelmäßige, sportliche Aktivitäten)
- Anschluss: Pyramide
- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: 660 g (Gr. 27 inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)
- Einbauhöhe: Größe 22 – 25 cm = 144 mm, Größe 25 – 29 cm = 155 mm
- wartungsfrei
- Garantie: 36 Monate

Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 26 cm	links	beige	5A430/..L1
22 – 26 cm	rechts	beige	5A430/..R1
25 – 29 cm	links	beige	5A430/..L1W
25 – 29 cm	rechts	beige	5A430/..R1W
22 – 26 cm	links	hellbraun	5A430/..L2
22 – 26 cm	rechts	hellbraun	5A430/..R2
25 – 29 cm	links	hellbraun	5A430/..L2W
25 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A430/..R2W

Bitte geben Sie die gewünschte Größe an, z. B. 5A430/324L1 = Gr. 24 cm, links, beige

 Der Buchstabe „W“ am Ende der Artikelnummer bedeutet eine weite Fußform speziell für Männer

Keilset

für Carbonfuß GO.free



Größe	Bestell-Nr.
22 – 25 cm	5A430/E31
26 – 29 cm	5A430/E32



GO.adventure

Carbonfuß



- erhöhte Energierückgabe und vertikale Stoßdämpfung durch dritte Carbonfeder
- intelligentes Zusammenspiel zwischen Elastomer und Carbon
- dynamisches und natürliches Gangbild auf unterschiedlichen Untergründen
- breite Basisfeder für seitliche Stabilität
- langer Vollkontakt
- Multiaxialität
- flexible Einstellung der Fersenhärte durch Fersenkeile
- inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke

Technische Daten

- max. Körpergewicht bis 150 kg (je nach Größe)
- Mobilitätsklasse (Walky): 3 bis 4
- Anschluss: Pyramide
- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: 700 g (Gr. 27 inkl. Fußkosmetik und Spectra-Socke)
- Einbauhöhe: Größe 22 – 25 cm = 144 mm, Größe 25 – 29 cm = 155 mm
- wartungsfrei
- Garantie: 36 Monate


Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 26 cm	links	beige	5A440/..L1
22 – 26 cm	rechts	beige	5A440/..R1
25 – 29 cm	links	beige	5A440/..L1W
25 – 29 cm	rechts	beige	5A440/..R1W
22 – 26 cm	links	hellbraun	5A440/..L2
22 – 26 cm	rechts	hellbraun	5A440/..R2
25 – 29 cm	links	hellbraun	5A440/..L2W
25 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A440/..R2W

Bitte geben Sie die gewünschte Größe an, z. B. 5A440/324L1 = Gr. 24 cm, links, beige

 Der Buchstabe „W“ am Ende der Artikelnummer bedeutet eine weite Fußform speziell für Männer

Keilset

für Carbonfuß GO.adventure

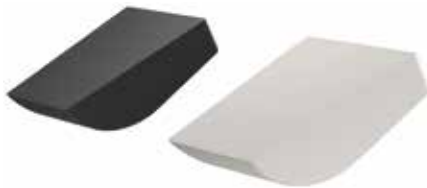

Größe	Bestell-Nr.
22 – 25 cm	5A440/E31
26 – 29 cm	5A440/E32



Farbe: beige



Farbe: hellbraun

Fußkosmetik

für alle Carbonfüße GO.

- inkl. Anschlussplatte

Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 26 cm	links	beige	5A400/X..L1
22 – 26 cm	rechts	beige	5A400/X..R1
25 – 29 cm	links	beige	5A400/X..L1W
25 – 29 cm	rechts	beige	5A400/X..R1W
22 – 26 cm	links	hellbraun	5A400/X..L2
22 – 26 cm	rechts	hellbraun	5A400/X..R2
25 – 29 cm	links	hellbraun	5A400/X..L2W
25 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A400/X..R2W

Bitte geben Sie die gewünschte Größe an, z. B. 5A400/X24L1 = Gr. 24 cm, links, beige

 Der Buchstabe „W“ am Ende der Artikelnummer bedeutet eine weite Fußform speziell für Männer


Spectra-Socke

für alle Carbonfüße GO.

- Socke in schwarz



Größe	Menge	Bestell-Nr.
22 – 25 cm	1 Stück	5A400/E11
22 – 25 cm	6 Stück	5A400/E12
26 – 29 cm	1 Stück	5A400/E13
26 – 29 cm	6 Stück	5A400/E14

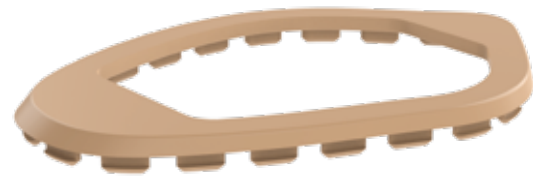

Farbe: beige



Farbe: hellbraun

Anschlussplatte

für alle Carbonfüße GO.

Größe	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
22 – 25 cm	links	beige	5A400/E41
26 – 29 cm	links	beige	5A400/E42
22 – 25 cm	rechts	beige	5A400/E43
26 – 29 cm	rechts	beige	5A400/E44
22 – 25 cm	links	hellbraun	5A400/E45
26 – 29 cm	links	hellbraun	5A400/E46
22 – 25 cm	rechts	hellbraun	5A400/E47
26 – 29 cm	rechts	hellbraun	5A400/E48



Fußlöffel

für alle Carbonfüße GO.

Bestell-Nr.
5M400



Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Germany
T +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de/op



100W222/D 2019-08

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt.

Die fotomechanische Vervielfältigung des gesamten Kataloges, auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Streifeneder ortho.production GmbH erlaubt.

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Richtwerte. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Käufer zumutbar sind.

Nach Redaktionsschluss des Katalogs, 09.08.2019, können sich Änderungen am Produkt ergeben.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie jederzeit unter www.streifeneder.de/op einsehen können.

