


## Für optimalen Halt und besten Komfort – der neue Control4Sil.

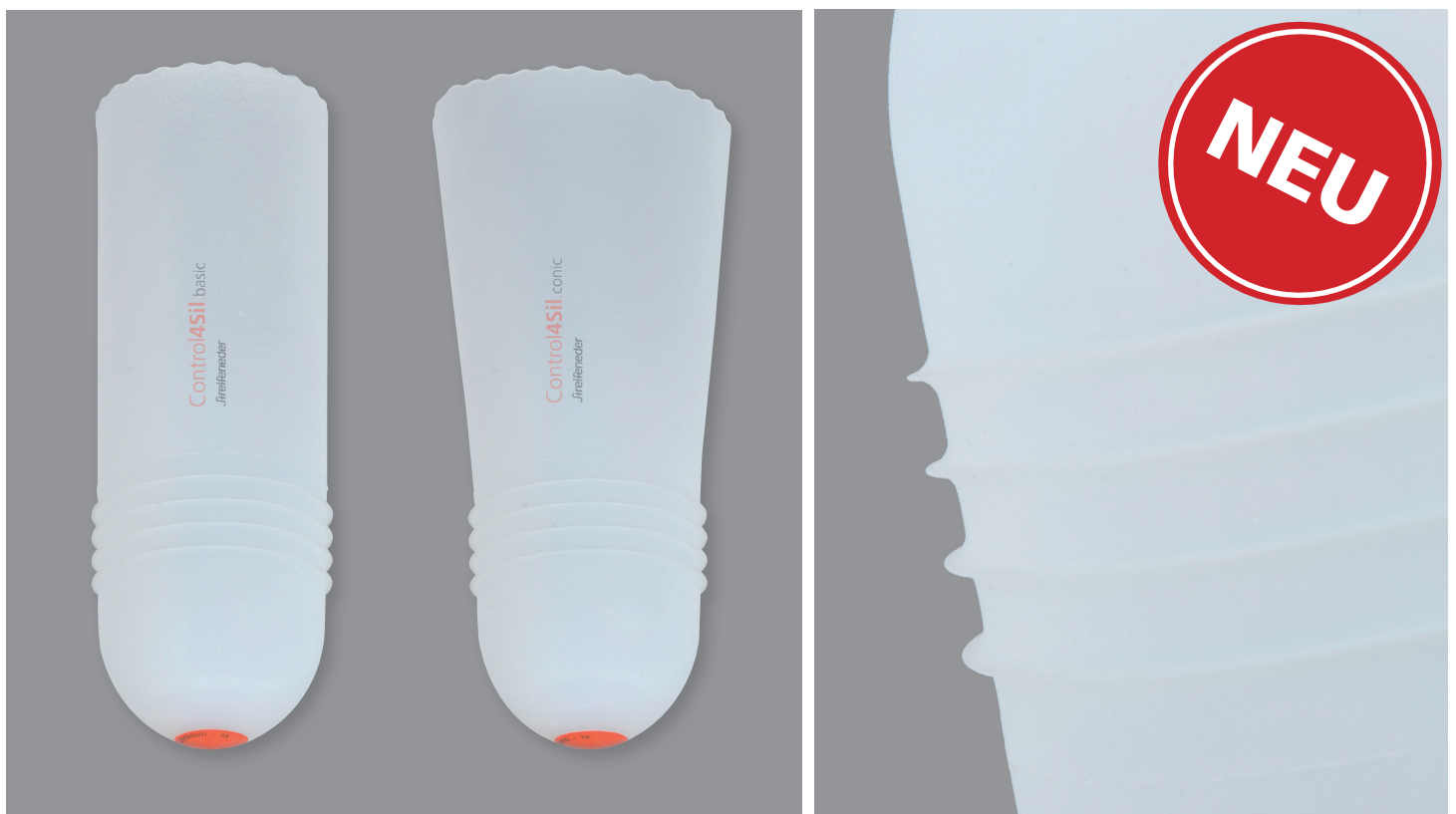

Der neue Dichtlippenliner Control4Sil. besteht aus hautfreundlichem Silikon und sorgt mit seinen vier Dichtlippen für eine optimale Haftung im Prothesenschaft. Die Außenseite ist mit einer speziellen Gleitbeschichtung versehen, die dem Anwender maximale Flexibilität und höchsten Komfort bietet: das An- und Ausziehen wird spürbar erleichtert und ist mit dem Control4Sil. sogar im Sitzen problemlos möglich. In Kombination mit dem pflegeleichten Silikon bietet der hochwertige Liner alle Vorteile für einen unbeschwerten Alltag.

### Eigenschaften

- für zwei Stumpfformen erhältlich: Control4Sil.basic 65S1 (zylindrisch) und Control4Sil.conic 65S5 (konisch)
- 4 ringförmige Dichtlippen für sichere Haftung durch Vakuum-Schaftsystem
- ideal zur Versorgung von Oberschenkelamputationen oder voluminösen Unterschenkelamputationen
- Mobilitätsklasse (Walky) 1 bis 4
- integrierter Matrixstrumpf reduziert Längshub bei gleichzeitig uneingeschränkter Querelastizität
- leicht zu reinigen, verwendbar im Nassbereich
- Größenlauf: 65S1 (zylindrisch) von Gr. 26,5 – 50, 65S5 (konisch) von Gr. 25 – 40