

Einfache Handhabung,
sichere Einstellung:

Die neue GenuSupport und GenuSupport.frontal





Der Weg zurück in ein aktives Leben

Die beiden bewährten Hartrahmenknieorthesen **GenuSupport** und **GenuSupport.frontal** haben ein Update bekommen und lassen sich jetzt **werkzeuglos einstellen**.

Die neuen Schnellverschlüsse halten die jeweilige Knieorthese sicher am Bein und machen das **Handling beim An- und Ablegen noch einfacher**.

Die zwei Orthesen werden zur Therapie **nach operativen Eingriffen** eingesetzt. Sie **unterstützen effektiv** den **Heilungsverlauf** nach Indikationen wie Rupturen des Kreuzbandes sowie begleitende oder isolierte Verletzungen an den Seitenbändern und Menisken. Mit **zahlreichen Features** erfüllen sie alle Anforderungen der Patient:innen!



Die Features auf einen Blick

1 **Geringes Gewicht – hoher Komfort**
Durch die **Aluminium-Magnesium Legierung** des Metallrahmens sind die Orthesen **leicht, stabil** und **verwindungssteif**. Die Durchbrechungen im Metallrahmen erleichtern das händische Anpassen an den individuellen Beinumfang und sorgen für ein **luftiges Design**.

2 **Innovative Polsterung mit Haftnoppen**
Der innovative Polsterstoff verfügt über eine **rutschfeste Beschichtung**. Kleinste **Haftnoppen aus Silikon** gewährleisten eine sichere Positionierung der Orthesen und Haut oder Kleidung. Nach operativen Eingriffen sorgen die geteilten und zusätzlich teilbaren Tiba-Polsterungen für ein **angenehmes Tragegefühl**.

Die Orthesen sind mit verschiedenen seitlichen Kondylen-Polsterungen ausgestattet:

- vorgeformte Polsterungen für die lateralen und medialen Kniegelenk-Kondylen
- neutrale Polsterungen, die je nach post-operativem Eingriff angepasst werden
- weiche Schaumstoffpolsterungen zur individuellen Anpassung durch Beschleifen oder Bekleben

3 **Individuell einstellbar**
Je nach Bedarf können die Hartrahmenknieorthesen **werkzeuglos** an Patient:innen **eingestellt** werden



- **Extension:** 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- **Flexion:** 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
- **komplette Ruhigstellung:** 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

4 **Laterale Führung**
Um aufkommende Hebelkräfte besser kontrollieren bzw. abfangen zu können, hat der Metallrahmen proximal eine **besonders hohe laterale Führung**, die mit dem Größenlauf anwächst.

Zusätzlich verfügen die Hilfsmittel über ein **robustes Doppelgelenk mit Gelenkverzahnung** und **langlebigen Gleitscheiben**, welche dem natürlichen Bewegungsbild im Kniegelenk folgen.

5 **Einfaches Handling**
Die Hartrahmenknieorthesen lassen sich durch einfaches händisches Anrichten gut an die Anatomie der Patient:innen anpassen.

Schnellverschlüsse an den Gurten **erleichtern das An- und Ausziehen**. Bei beiden Modellen ist der **oberste Gurt gekippt**, so dass er beim Schließen der Anatomie des Oberschenkels folgt.

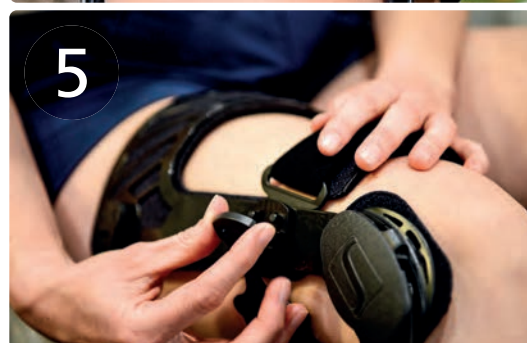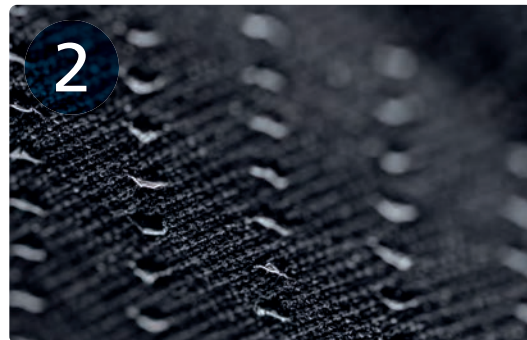

Hartrahmenknieorthese GenuSupport

Größe	Seite	Oberschenkelumfang ①	Bestell-Nr.
S	links	39 – 46 cm	55R1/LS
M	links	46 – 53 cm	55R1/LM
L	links	53 – 60 cm	55R1/LL
XL	links	60 – 67 cm	55R1/LXL
XXL	links	67 – 74 cm	55R1/LXXL
S	rechts	39 – 46 cm	55R1/RS
M	rechts	46 – 53 cm	55R1/RM
L	rechts	53 – 60 cm	55R1/RL
XL	rechts	60 – 67 cm	55R1/RXL
XXL	rechts	67 – 74 cm	55R1/RXXL

Positionsnummer 23.04.03.3064



Hartrahmenknieorthese GenuSupport.frontal


Größe	Seite	Oberschenkelumfang ①	Bestell-Nr.
S	links	39 – 46 cm	56R1/LS
M	links	46 – 53 cm	56R1/LM
L	links	53 – 60 cm	56R1/LL
XL	links	60 – 67 cm	56R1/LXL
XXL	links	67 – 74 cm	56R1/LXXL
S	rechts	39 – 46 cm	56R1/RS
M	rechts	46 – 53 cm	56R1/RM
L	rechts	53 – 60 cm	56R1/RL
XL	rechts	60 – 67 cm	56R1/RXL
XXL	rechts	67 – 74 cm	56R1/RXXL

Positionsnummer 23.04.03.3070



Die Länge der Orthesen beträgt außen ca. 43 cm.

Bitte von der Kniemitte 15 cm oberhalb den Oberschenkelumfang messen.

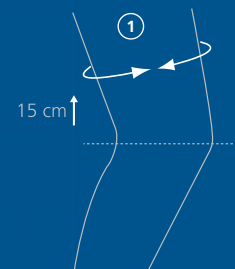

Pluspunkt GenuSupport.frontal

Bei **bettlägerigen** oder **mobilitätseingeschränkten Patient:innen** ist das Anziehen der Hartrahmenknieorthesen oft nur schwer möglich.

Die **GenuSupport.frontal** lässt sich deshalb **von oben auflegen** und **sicher verschließen**. Ein „Durchsteigen“ ist nicht notwendig.





Praktische Begleiter – das Zubehör

Jeder Hartrahmenknieorthese liegt ein **nützlicher Tragebeutel** mit **Schultergurt** und **integriertem Verschluss** bei. Separat können für die GenuSupport und GenuSupport.frontal **hochwertige Ersatzartikel** bestellt werden:

- **Ersatzpolstereset für Rahmen**, Bestell-Nr. 55R10 bzw. 56R10
- **Ersatzkniepolstereset**, Bestell-Nr. 55R11
- **Ersatzkeileseset**, Bestell-Nr. 55R12





Streifeneder ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering · Germany

T +49 8141 6106-0 · F +49 8141 6106-50

office@streifeneder.de



300W188/D 2023-05

www.streifeneder.de/op

Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Die fotomechanische Vervielfältigung der gesamten Broschüre, auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Streifeneder ortho.production GmbH erlaubt. Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Richtwerte. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Käufer zumutbar sind. Nach Redaktionsschluss der Broschüre, 26.07.2023 können sich Änderungen am Produkt ergeben.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.streifeneder.de/op einsehen können.